


# PROLAFIX<sup>®</sup> V

IMPLANT POUR CURE DE PROLAPSUS PAR VOIE VAGINALE

*IMPLANT FOR PROLAPSE REPAIR THROUGH VAGINAL APPROACH*

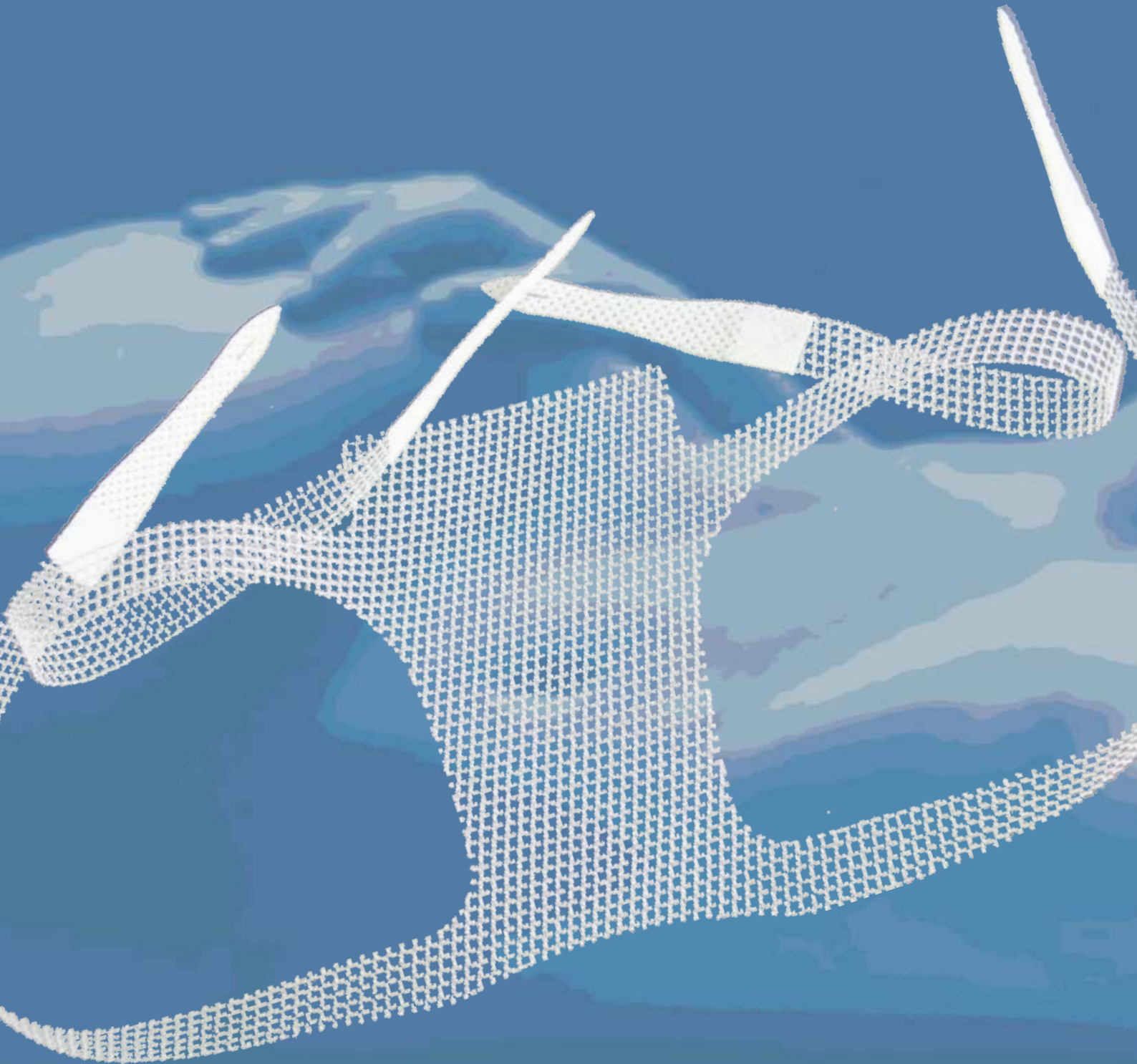

**MICROVAL**  
FRANCE


# PROLAFIX<sup>®</sup> V

## IMPLANT POUR CURE DE PROLAPSUS PAR VOIE VAGINALE IMPLANT FOR PROLAPSE REPAIR THROUGH VAGINAL APPROACH



Les implants PROLAFIX<sup>®</sup> V pour cure de prolapsus par voie vaginale sont principalement adaptés aux cures de cystocèle.

Ils sont composés d'un treillis à larges mailles tricoté à partir de polypropylène monofilament de diamètre 150µm. Leur mode de tricotage évite tout relargage de particules. Ils possèdent une grande résistance, une élasticité limitée et une surface macro-poreuse pour une bonne intégration tissulaire. Leur forme à deux ou quatre bras permet une adaptation à la technique opératoire et l'anatomie. La découpe de ses extrémités en polypropylène non-tissé permet un accrochage aisé et sécurisé au bout de l'aiguille.

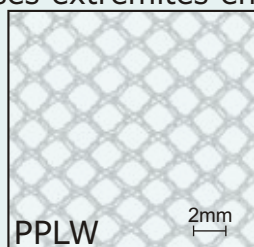


*PROLAFIX<sup>®</sup> V implants for prolapse repair through vaginal approach are mainly indicated in cystocele repair.*

*They are made of a knitted 150µm polypropylene monofilament. Their knitting way avoids every particles leakage.*

*They have a high mechanical resistance, a reduced elasticity and a macro-porous surface ensuring a good tissue integration.*

*The two or four arms shape allow a good fitting to anatomy and operative technic. The cutting of its extremities in non-woven polypropylene make easier a safe fixation on the needles tip.*

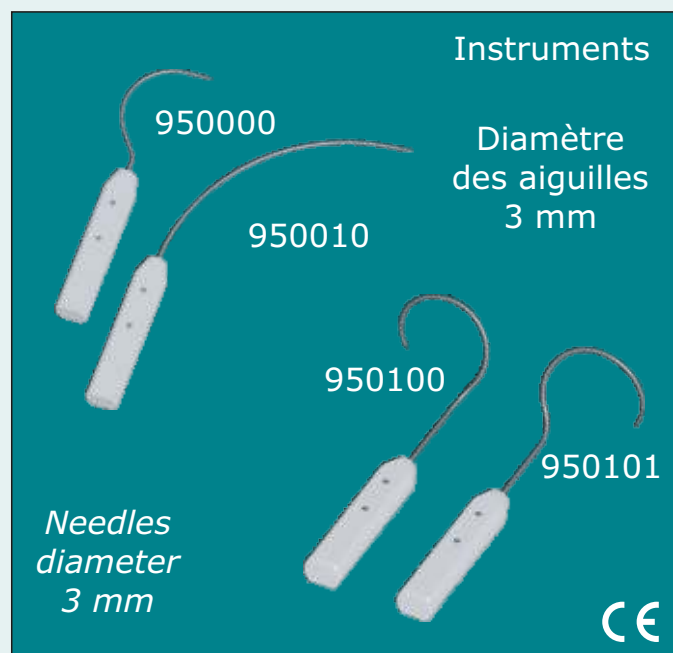

Références References		Dimensions/Sizes (cm)
512002	Implants	Prolafix <sup>®</sup> V longueur : 40, largeur : 6 , hauteur 8,5 - (2 bras) <i>Prolafix<sup>®</sup> V lenght : 40, width : 6 , height 8.5 - (2 arms)</i>
512004		Prolafix <sup>®</sup> V longueur : 40, largeur : 5 , hauteur 10 - (4 bras) <i>Prolafix<sup>®</sup> V lenght : 40, width : 5 , height 10 - (4 arms)</i>
950000	Instruments	Aiguille petite courbure <i>Small curve needle</i>
950010		Aiguille grande courbure <i>Large curve needle</i>
950100		Aiguille spirale pour voie trans-obturatrice droite <i>Trans obturator approach right spiral needle</i>
950101		Aiguille spirale pour voie trans-obturatrice gauche <i>Trans obturator approach left spiral needle</i>

Ces implants sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène et sont livrés conditionnés sous double sachets et boîte carton.  
*These implants are sterilized by ETO and are delivered packaged under double pouches and cardboard box.*

