


SAFIRE[®]

BANDELETTE POUR CURE D'INCONTINENCE URINAIRE D'EFFORT
TAPE FOR STRESS URINARY INCONTINENCE CARE

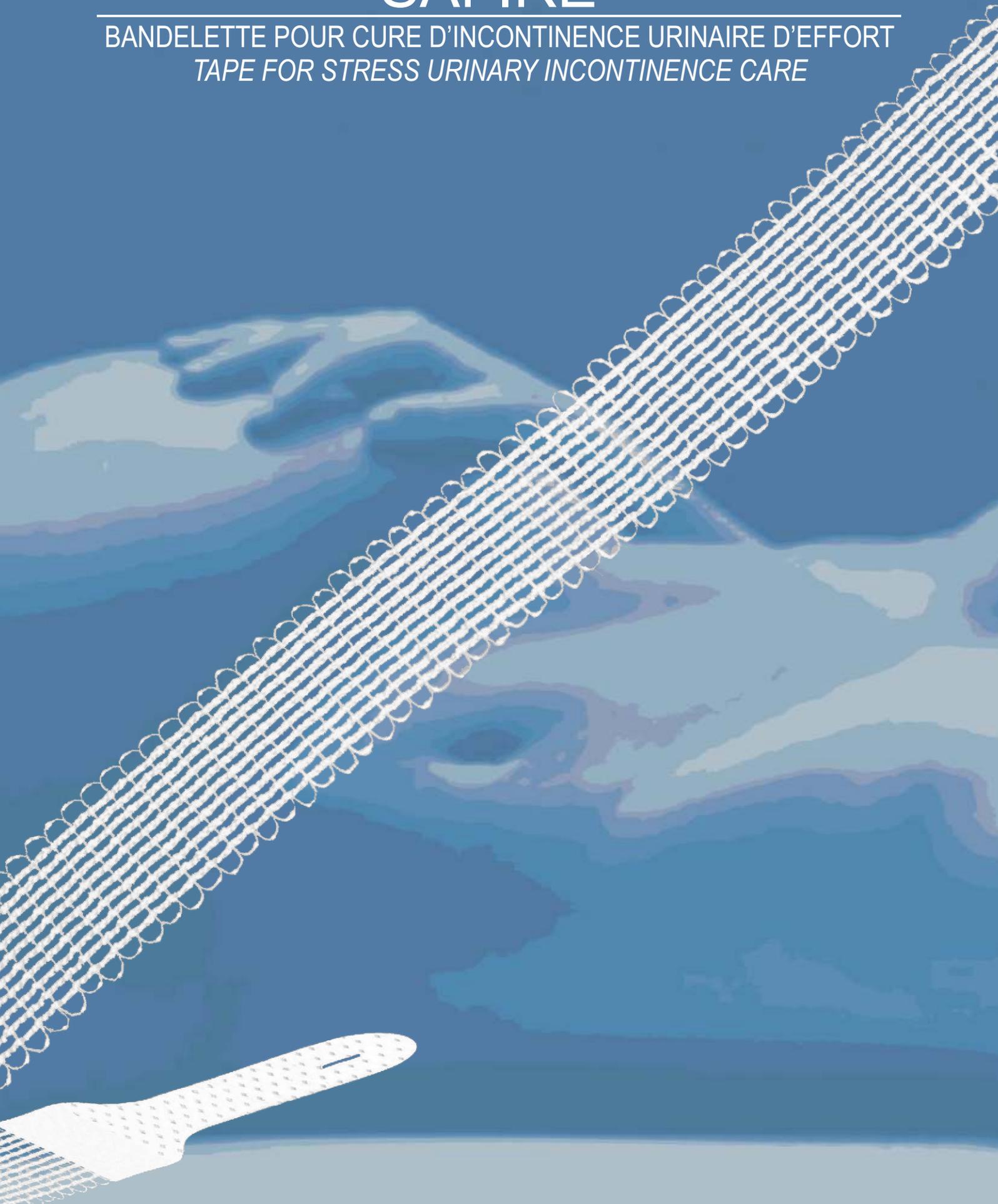


MICROVAL
FRANCE

SAFIRE®

BANDELETTE POUR CURE D'INCONTINENCE URINAIRE D'EFFORT TAPE FOR STRESS URINARY INCONTINENCE CARE

SAFIRE® for a Safe Incontinence Repair

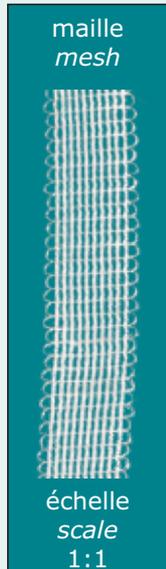


SAFIRE® tape for stress urinary incontinence care is made of knitted 80µm polypropylene monofilament with a thickness of 0.45 mm, for a surface mass less than 60 g/m². The mean SAFIRE® strength to rupture* value is 52N, with 41% of stretching before rupture. Its mode of knitting avoids every particles leakage and gives soft edges. Its macro-porous surface ensures a good tissue integration. The cutting of its extremities in non-woven polypropylene makes easier a safe fixation on the needles tip.

SAFIRE® can be used whatever the surgical technic vaginal, sub-pubic or transobturator approach.

La bandelette sous urétrale SAFIRE® pour cure d'incontinence urinaire d'effort est composée d'une maille tricotée à partir de polypropylène monofilament de diamètre 80µm. Elle a une épaisseur de 0,45 mm, et une masse surfacique inférieure à 60 g/m². La résistance à la rupture* moyenne de SAFIRE® est de 52N, avec un allongement à la rupture de 41%. Son mode de tricotage évite tout relargage de particules et donne des bords non-agressifs. Elle possède une surface macro-poreuse pour une bonne intégration tissulaire. La découpe de ses extrémités en polypropylène non-tissé permet un accrochage aisé et sécurisé au bout de l'aiguille.

SAFIRE® peut être utilisée quelle que soit la voie d'abord vaginale, sus-pubienne ou trans-obturatrice.

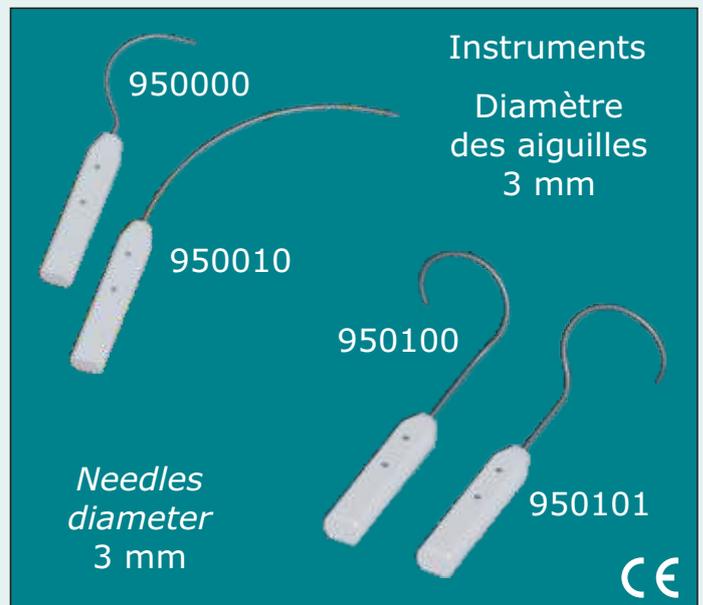

Références References		Dimensions/Sizes
510500	Implant	Bandelette SAFIRE® longueur : 50 cm, largeur utile : 1 cm <i>SAFIRE® tape length : 50 cm, width : 1 cm</i>
950000	Instruments	Aiguille petite courbure <i>Small curve needle</i>
950010		Aiguille grande courbure <i>Large curve needle</i>
950100		Aiguille spirale pour voie trans-obturatrice droite <i>Trans obturator approach right spiral needle</i>
950101		Aiguille spirale pour voie trans-obturatrice gauche <i>Trans obturator approach left spiral needle</i>

* Mesurée selon norme/Measured according standard : ISO 13934-1 (06-1999)

Ces implants sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène et sont livrés conditionnés sous blister+sachet et boîte carton.
These implants are sterilized by ETO and are delivered packaged under blister+pouche and cardboard box.

